

POP

HUAB - UFRN/EBSERH

EMPACOTAMENTO DE MATERIAL – TÉCNICA DE ENVELOPE

Versão: 03 | 2023

1 OBJETIVO

Adoção da técnica correta para o empacotamento do material pela equipe de enfermagem, durante suas atividades na CME.

2 MATERIAL


- Tecido não tecido (SMS) ou Campo de algodão;
- Material a ser empacotado;
- Fita branca hospitalar;
- Fita teste para autoclave.

3 DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

- Lavar as mãos antes de iniciar o preparo e empacotamento dos artigos;
- Inspeccionar o material antes do empacotamento, verificando limpeza, integridade e funcionalidade;
- Selecionar a embalagem de acordo com o uso do material que será embalado;
- Colocar o campo de algodão ou tecido não tecido (SMS) em posição de losango sobre a mesa;
- Colocar o material no centro do campo ou SMS (foto 1);
- Pegar a ponta voltada para o funcionário, cobrir o material e fazer dobra(s) externa(s) na ponta, de acordo com a necessidade (foto 2);
- Pegar uma das laterais do campo ou SMS e fazer outra(s) dobra(s) sobrepondo à primeira (foto 3);
- Repetir o procedimento com a outra lateral (foto 4);
- Completar o pacote trazendo a ponta restante sobre o material finalizando-o, atentando para não haver aberturas no pacote, evitando entrada de ar (foto 5);
- Fechar o pacote com fita branca, envolvendo todo o pacote, até ultrapassar no mínimo 3cm do encontro da fita, vendo a necessidade de repetir este processo para garantir o fechamento (foto 6);
- Repetir o processo com a fita teste, no sentido perpendicular à fita branca (foto 7);
- Etiquetar a embalagem do artigo com as seguintes informações: nome do produto, assinatura do preparador (foto 6).

Atenção: na ausência da etiquetadora, realizar o preenchimento dos dados manualmente com caneta esferográfica ou marcadores permanentes, na cor azul ou preta.

Figura 1 – Etapas para dobradura tipo envelope

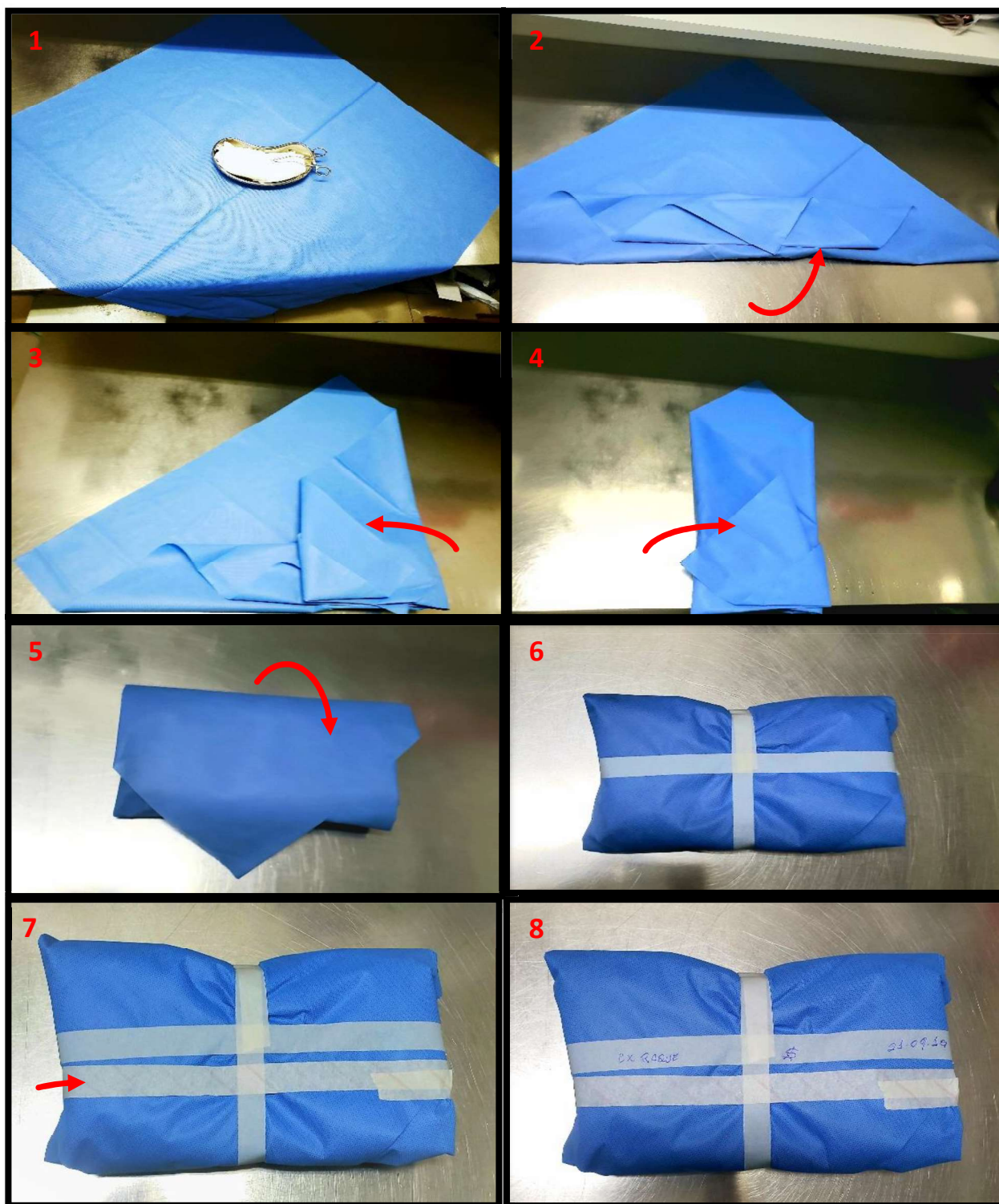

4 REFERÊNCIAS

Brunner & Suddarth. **Tratado de enfermagem médico cirúrgica**. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005.

HMEC. **Manual de normas e rotinas de enfermagem do centro cirúrgico, recuperação e central de material**. 4 ed. São Paulo. 2012. 179p. Disponível em: <<https://http://sms.sp.bvs.br/lildbi/docsonline/get.php?id=5813>>. Acesso em: set 2023.

5 HISTÓRICO DE REVISÃO

Versão	Data	Descrição da atualização
01	20/04/2017	Versão inicial.
02	21/09/2019	Revisão do POP
03	23/09/2023	Atualização de Bibliografia - Revisão

6 RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO

Elaboração Maria das Vitorias do Nascimento Lima, Técnico de Enfermagem - UBCME	Data: 20/04/2017
Análise Lidianny Michelle da Silva Pontes, Enfermeiro Assistencial – UMUL Thaís Michele da Silva Teixeira, Técnico em Enfermagem - UMUL	Data: 21/09/2019
Marcelo de Medeiros Lucena, Enfermeiro Assistencial – UBCME Marcio Adriano da Motta, Enfermeiro Assistencial - UBCME Suécia dos Santos Maia, Técnico de Enfermagem - UBCME Maria das Vitorias do Nascimento Lima, Técnico de Enfermagem - UBCME	Data: 23/09/2023
Validação técnica Vanessa Freire Maia, STGQ/SUP Setor de Gestão da Qualidade	Data: 28/11/2024
Aprovação Rita Berenice da Silva Costa, UBCME/GAS Chefe da Unidade de Bloco Cirúrgico e Material Esterilizado	Data: 28/11/2024



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANA BEZERRA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Praça Tequinha Farias, nº 13 - Bairro Centro, Santa Cruz/RN, CEP 59200-000
- <http://huab-ufrn.ebserh.gov.br>

Certidão

Processo nº 23527.006694/2024-31

Interessado: @interessados_virgula_espaco@

Elaboração Maria das Vitorias do Nascimento Lima, Técnico de Enfermagem - UBCME	Data: 20/04/2017
Análise Lidianny Michelle da Silva Pontes, Enfermeiro Assistencial – UMUL Thaísa Michele da Silva Teixeira, Técnico em Enfermagem - UMUL	Data: 21/09/2019
Marcelo de Medeiros Lucena, Enfermeiro Assistencial – UBCME Marcio Adriano da Motta, Enfermeiro Assistencial - UBCME Suécia dos Santos Maia, Técnico de Enfermagem - UBCME Maria das Vitorias do Nascimento Lima, Técnico de Enfermagem - UBCME	Data: 23/09/2023
Validação técnica Vanessa Freire Maia, STGQ/SUP Setor de Gestão da Qualidade	Data: 28/11/2024
Aprovação Rita Berenice da Silva Costa, UBCME/GAS Chefe da Unidade de Bloco Cirúrgico e Material Esterilizado	Data: 28/11/2024



Documento assinado eletronicamente por **Márcio Adriano da Motta, Enfermeiro(a)**, em 28/11/2024, às 16:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Maria das Vitórias do Nascimento Lima, Técnico(a) em Enfermagem**, em 11/12/2024, às 15:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Suécia dos Santos Maia, Técnico(a) em Enfermagem**, em 07/01/2025, às 17:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo de Medeiros Lucena, Enfermeiro(a)**, em 08/01/2025, às 09:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Rita Berenice da Silva Costa, Chefe de Unidade**, em 01/04/2025, às 13:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Lidianny Michelle da Silva Pontes, Enfermeiro(a)**, em 02/07/2025, às 11:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Thaísa Michele da Silva Teixeira, Técnico(a) em Enfermagem**, em 08/07/2025, às 07:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Franciane Carla de Souza Bento, Assistente Administrativo**, em 10/07/2025, às 11:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **44672777** e o código CRC **63ED9CA0**.
