

Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b>	POP.CCA.008 - Página 1/4	
Título do Documento	<b>TROCA DE DISPOSITIVO PARA ESTOMIA INTESTINAL</b>	Emissão: 06/05/2020 Versão: 1	Próxima revisão: 06/05/2022

## 1. OBJETIVO(S)

- Higienizar o estoma e sistema coletor;
- Prevenir lesões na pele peri-estoma;
- Avaliar o estoma.

## 2. MATERIAL

- Bandeja;
- Luva de procedimento;
- Gaze;
- Soro fisiológico (SF) 0,9% ou água potável;
- Sistema coletor( bolsa), com clamp, de acordo com o tipo de estoma;
- Medidor de estoma;
- Tesoura curva, ponta romba;
- Pasta adesiva sem álcool e/ou pó de resina sintética para ostomias;
- Saco branco para lixo.

## 3. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

- Separar todo material e acondicioná-lo na bandeja, mantê-lo próximo ao paciente;
- Higienizar as mãos conforme protocolo da instituição;
- Manter o paciente em posição confortável;
- Colocar um campo de proteção abaixo da região onde será trocada a bolsa, para proteção da roupa do paciente;
- Explicar ao paciente o procedimento que será realizado;
- Calçar as luvas de procedimento;
- Retirar o dispositivo coletor com SF 0,9% e/ou água potável;

Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b>	POP.CCA.008 - Página 4/4	
Título do Documento	<b>TROCA DE DISPOSITIVO PARA ESTOMIA INTESTINAL</b>	Emissão: 06/05/2020 Versão: 1	Próxima revisão: 06/05/2022

- Descartar bolsa em local próprio para resíduos biológicos;
- Limpar o estoma e a região peri-estomal com SF. 0.9% e/ou água potável, observando as condições da pele e do estoma;
- Secar a pele com gaze sem friccionar;
- Manter uma gaze sobre o estoma para evitar drenagem de fezes na pele já limpa;
- Medir o estoma com o medidor (em caso de estoma irregular fazer molde);
- Traçar o molde no verso da placa;
- Recortar base de resina do dispositivo e friccionar com o dedo toda base recortada corrigindo irregularidades;
- Retirar o papel protetor da base;
- Colocar a pasta de resina sintética na base recortada e se necessário preencher espaços vazios na região peri-estoma;
- Aderir a base de resina na pele e pressionar toda extensão da base de resina para obter maior aderência;
- Colocar o clamp/presilha no dispositivo fechando-o;
- Recolher todo material mantendo o ambiente em ordem.

#### 4. REFERÊNCIAS

VIANA, Dirce Laplaca. **Boas práticas de enfermagem**. 1ª Ed. São Caetano do Sul: Yendis, 2010.

SANTOS, VLCG; CESARETTI, IUR. **Assistência em Estomaterapia: cuidando de pessoas com estomia**. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2015.

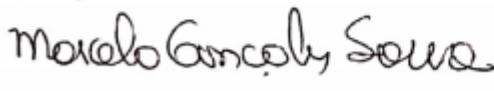
Treinar e educar em ostomias – Coloplast Ostomy forum, 2003.

#### 5. HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
01	06/05/2020	Elaboração do Procedimento Operacional Padrão



Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b>	POP.CCA.008 - Página 4/4	
Título do Documento	<b>TROCA DE DISPOSITIVO PARA ESTOMIA INTESTINAL</b>	Emissão: 06/05/2020 Versão: 1	Próxima revisão: 06/05/2022

<b>Elaboração</b> Giselle de Fátima Nascimento dos Santos Cavalcante Alexandra de Assis Pessoa Guerra	Data: 06/05/2020
<b>Revisão</b> Marta Miriam Lopes Costa	Data: 30/09/2020
<b>Validação</b> Enfª Drª Larycia Vicente Rodrigues	Data: 20/11/2020
<b>Aprovação</b> 	Data: <u>23, 11, 2020</u>

Profa. Dr.ª Marcela Gonçalves Sousa  
Coordenadora da Unidade de Cirurgia Geral  
CRM 5436

*Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte*