



MEMORIAL DESCRITIVO - PAINEL DIREITO DO GANTRY, BX77 -6099*M 2

Aparelho de tomografia computadorizada Canon – Aquilion Prime – TSX-303A

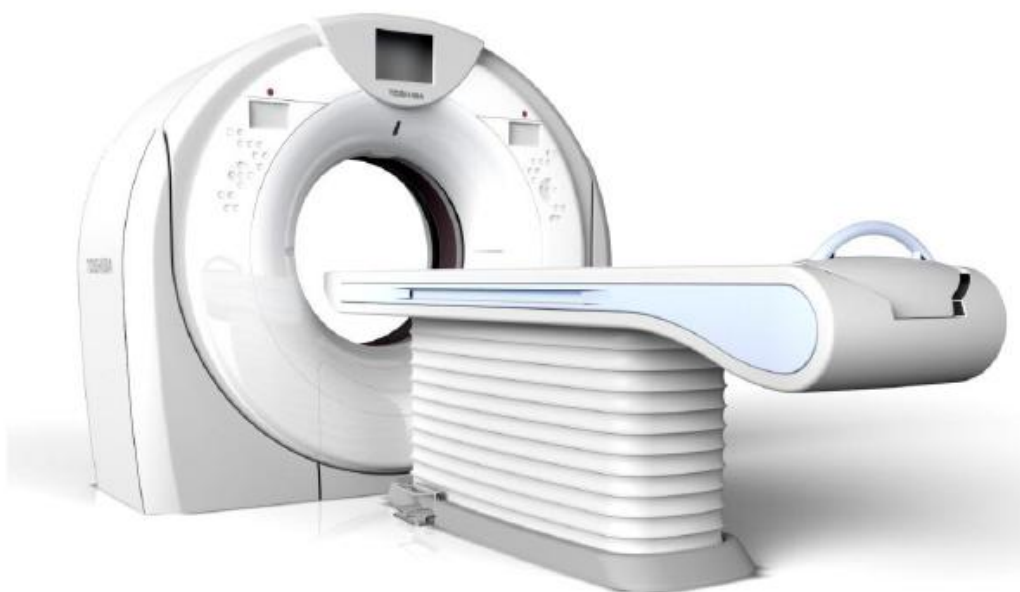

1 - Ilustração do item PAINEL DIREITO DO GANTRY, BX77 -6099*M 2

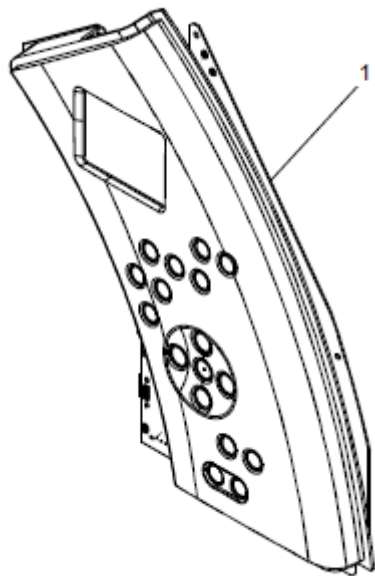

Detalhe do item montado na carenagem frontal do Gantry:



2 - Descrição detalhada: o item PAINEL DIREITO DO GANTRY, BX77 - 6099*M 2 placa de circuito impresso multicamadas, componentes eletrônicos discretos, conexões de alimentação e dados, botões de acionamento, monitor LCD, além de uma carcaça metálica para sua fixação no Gantry do equipamento.

3- Aplicação: parte homologada e de uso no equipamento de tomografia computadorizada Canon, modelo Aquilion Prime TSX-303A, o item PAINEL DIREITO DO GANTRY, BX77 -6099*M 2 fica instalado na tampa frontal do Gantry do equipamento e tem as funções:

- Realizar interface com o operador através de botões para realizar a movimentação da mesa de pacientes e inclinação do Gantry.
- Realizar interface com o operador através de botões para realizar o acionamento dos lasers de posicionamento do paciente.
- Realizar interface com o operador através de botões para realizar o desligamento imediato do Gantry através do botão de emergência
- Recebe os dados da placa de controle do Gantry e mostra no monitor de LCD os dados de posição horizontal e vertical da mesa e da inclinação do Gantry.